




红外测温仪

使用说明

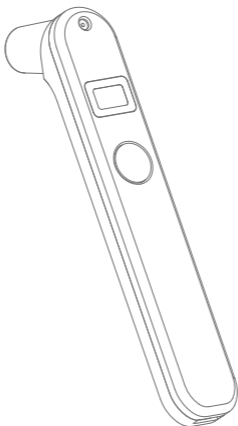

使用产品前, 请仔细阅读说明书

简介

Kica红外测温仪(以下简称“测温仪”)利用红外测温技术可无接触测量物温、体温等,是一款轻巧便携的家用测温仪。


产品特点

- 采用金属铝制机身外壳,造型时尚轻巧
- 采用远红外探测头,无接触式测量,1秒测温响应,快速准确
- 可测量物体人体体表温度
- 温度过高、过低报警提示
- 自带OLED显示屏,测试数值清晰,夜间可见
- 低功耗设计,节能省电,无操作智能自动关机
- 带电量提示,内置可直充充电电池,支持充电宝边充边用



*** 请注意: 本产品不防水!**

1. 结构示意图

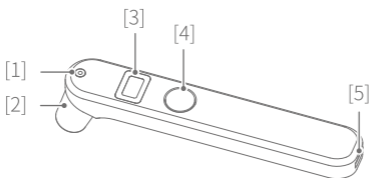

[1]指示灯

[2]探测头

[3]OLED显示屏

[4]测量键

[5]Micro-USB充电口

配件：



Micro-USB充电线

2. 使用



测量键	描述
单击	开机 / 单次测量 (体温测量下)
长按至“滴”声	切换物温测量模式 / 体温测量模式
三连击	切换华氏度(°F) / 摄氏度(°C)

2.1 开机

单击测量键,即开机开始测量。

2.2 物温测量

在物温测量模式下,将探测头垂直于测量对象,即可自动测量。
30秒内无操作自动关机。

2.3 体温测量

在体温测量模式下,将探测头垂直于额头,单击测量键测量,单击一次即测量一次。
8秒内无操作自动关机。

2.4 测量模式切换

长按测量键至“滴”声响起,进度条加载完成,即切换物温测量模式 / 体温测量模式。

2.5 切换测量单位

三连击测量键,可切换华氏度(°F)/ 摄氏度(°C)。

3. 指示灯指示说明


物温模式	指示灯	说明	温度范围*
	绿灯亮	温度正常	-9.9°C~80°C (14.1°F~176°F)
	黄灯亮	低温警告	< -9.9°C (14.1°F)
	红灯亮	高温警告	> 80°C (176°F)

体温模式	指示灯	说明	温度范围
	绿灯亮	温度正常	35°C~37.4°C (95°F~99.4°F)
	黄灯亮	温度稍高	37.5°C~39°C (99.5°F~102°F)
	红灯亮	高温警告	39.1°C~42°C (103°F~107°F)

4. 显示屏指示说明

图标	含义	图标	含义
°C	摄氏度(体温模式下)	LOW	低温警告
°F	华氏度(体温模式下)	HIGH	高温警告
Obj °C	摄氏度(物温模式下)		电量不足, 请及时充电
Obj °F	华氏度(物温模式下)		模式切换进度条

5. 充电

本产品电池为内置电池。当屏幕显示为“”并关机时, 请及时充电。充电时, 红灯常亮, 充电完成时, 绿灯常亮。



规格参数

产品名称	Kica 红外测温仪
产品型号	F1
测温响应速度	物温模式: 0.8s (刷新速度) 体温模式: 1s
测量显示数值范围*	物温模式: $-9.9^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ ($14.1^{\circ}\text{F}\sim 176^{\circ}\text{F}$) 体温模式: $35^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$ ($95^{\circ}\text{F}\sim 107^{\circ}\text{F}$)
测量低温警告 (报警显示LOW)	物温模式: $< -9.9^{\circ}\text{C}$ (14.1°F) 体温模式: $< 35.0^{\circ}\text{C}$ (95°F)
测量高温警告* (报警显示HIGH)	物温模式: $> 80^{\circ}\text{C}$ (176°F) 体温模式: $> 42^{\circ}\text{C}$ (107°F)
自动关机时间	物温模式: 30s 体温模式: 8s
显示数值分辨率	0.1°C (0.1°F)
工作时间	18小时
充电时间	1小时
电池容量	300mAh
工作环境湿度	$< \text{Rh}90\%$ (非冷凝)
产品重量	55g (参考值)
产品尺寸	119.5 x 20 x 30.5mm (长x宽x高)
清单	测温仪x1、Micro-USB充电线x1、说明书x1

*物温测试环境为 25°C (77°F) 室温环境下

注意事项

- ⊗ 本产品不防水, 请注意不要将本产品浸入液体。
- ⊗ 禁止触碰带腐蚀性液体或物体。
- ⊗ 切勿将本产品投入火中, 当产品超过使用期限时, 请根据当地法规进行处理, 注意环保。
- ⊗ 请勿让本产品受到重摔或碰撞。
- ⊗ 请勿拆卸、修理和改装本产品。

* 测量结果并不能取代医师诊断, 请勿作为自我诊断的凭据, 请遵医嘱。

储存保养

- 请将本产品放置于干燥的地方, 避免灰尘和直接的强光照射。
- 请小心保护探测头, 以免影响测量准确性。
- 请小心保护显示屏表面。
- 请保管于小孩无法取到的地方。
- 定期使用75%的酒精沾湿棉布清洁产品外壳, 注意不要让液体进入内部。
- 请勿过放电池, 长时间不用时, 请保持本产品电量充足。

特别说明

本公司保留对产品技术、配件、说明书、产品包装等随时进行修改的权利，恕不进行通知，产品以实物为准，图片仅供参考。

最终解释权归桂林摩羯医疗器械有限公司所有。

制造商：桂林摩羯医疗器械有限公司

地址：桂林市七星区朝阳路信息产业园 D-14-1b 地块 3 号楼 4 楼

售后服务电话：0773-2320865

网址：www.kica-tech.com

说明书版本：V1.0