
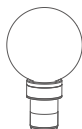
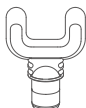


KiCA


筋膜枪

使用说明 (V2.1) 型号: K2

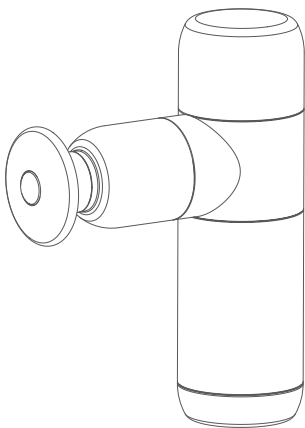

产品概览

主机

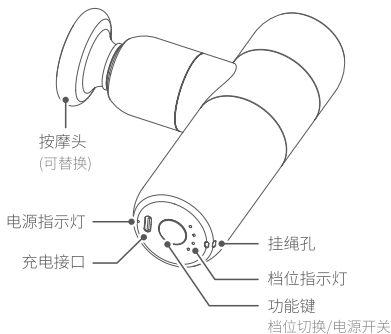

按摩头

磁石



平头

按摩腰背平型大肌群

磁石



圆锥头

冲击深层组织, 如经络、
穴位等



球型头

放松软组织及敏感肌群




U型头

按摩颈部与跟腱处


产品使用

安装/替换按摩头

根据按摩需求选择按摩头插入筋膜枪前方圆孔内。

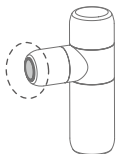


安装效果:

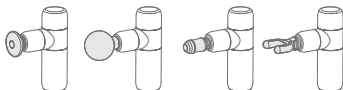

开机

长按功能键。

！禁止在充电时使用

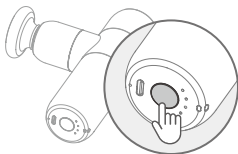

关机

单击功能键至停机或长按功能键。

档位切换

开机后，单击功能键可依次切换档位。

停机后2秒，自动关机。

档位	额定转速(转/分钟)
一档	1200
二档	2000
三档	3200
智能按摩	1200~3200
停机	0

智能按摩

本机具有智能按摩功能，可自动以高低档转速循环按摩，最高转速为3200转/分钟，最低转速为1200转/分钟。

智能保护

本机具有智能保护功能。为防止长时间按摩肌肉受到损伤，连续工作10分钟档位指示灯会熄灭，保持电源指示灯状态，5秒内单击电源键进入一档重新计时，无操作则自动关机。

堵转保护

本机具有堵转保护功能。堵转持续超过3秒，进入停机状态，需按功能键重新启动，若10秒内无操作将自动关机。

指示灯


电源指示灯

灯	闪灯状态	描述
红灯	——	充电中
绿灯	——	充电完成
绿灯	——	电量足
绿灯	— —	电量中
绿灯	• • • •	电量弱，需要充电

档位指示灯

灯	状态	描述
蓝灯	● ○ ○ ○	一档档位
蓝灯	● ● ○ ○	二档档位
蓝灯	● ● ● ○	三档档位
蓝灯	● ● ● ●	智能按摩

充电

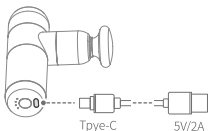


！禁止在使用时充电

参数

产品名	Kica 筋膜枪	充电时长	>2.5小时
型号	K2	主机重量	485g (参考值)
工作电压范围	10.6V-12.6V	产品尺寸	90.5x144.6x44mm
电池容量	2000mAh	理论续航	约11小时

清单

- | | | | |
|-------|----|-------------|----|
| ① 主机 | x1 | ⑥ Type-C充电线 | x1 |
| ② 平头 | x1 | ⑦ 收纳包 | x1 |
| ③ 圆锥头 | x1 | ⑧ 防丢手绳 | x1 |
| ④ 球型头 | x1 | ⑨ 说明书 | x1 |
| ⑤ U型头 | x1 | | |

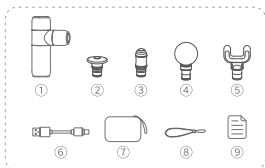

! 禁忌

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| (1) 禁止癌症患者使用 | (7) 谨慎给肾结石患者使用(不要靠近肾脏区域) |
| (2) 禁止接受金属骨针内固定术的患者使用(禁止直接在骨折部位使用) | (8) 禁止静脉舒张患者使用 |
| (3) 禁止骨质疏松患者使用 | (9) 禁止急性炎症患者使用 |
| (4) 禁止静脉血栓和搏动患者使用 | (10) 按摩同一个部位, 不要超过4-5分钟 |
| (5) 禁止高血压患者使用 | (11) 不要按摩骨头部位 |
| (6) 谨慎给孕妇使用(不要靠近腹部) | |



使用时, 请勿强力按压按摩头阻碍电机转动, 否则会降低设备使用寿命!

免责声明

感谢您选用本产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任, 请务必认真阅读, 以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和注意事项来操作, 可能会给您和周围人带来伤害, 损坏本产品或周围产品。

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品, 本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任(包括直接或间接或者第三方的损失)。我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品, 将不予任何服务。

安全说明

1. 本产品不建议直接按摩皮肤表面, 可能对皮肤造成伤害。按摩部位需身着干燥干净的衣物或放置干净干燥的毛巾后使用, 需轻轻按压并移动。
2. 在不产生疼痛感和不适感的情况下, 只能对身体软组织部位使用高速和加压使用, 不可以对头部和身体任何骨骼部位使用高速和高压。
3. 频繁的高速、高压对同一部位施压会造成擦伤, 有疼痛感和不适应立即停止使用。
4. 手指、头发或全身任何部位毛发请远离设备伸缩部位, 防止夹痛、夹伤。
5. 请勿丢弃和错误使用本产品。
6. 请勿私自对本产品做任何改装。
7. 请勿在无人的状态下运行或对本产品充电。
8. 本产品仅供成年人使用。
9. 禁忌范围症状人群请在医生许可下使用本产品。

注意

1. 本产品在启动时请确保按摩头前无障碍物, 如受外力阻挡, 将短暂暂停后重新尝试启动。
2. 本产品不防水, 请勿将本产品接触到水或其他液体。
3. 请勿拆卸产品整机, 如不慎拆开导致工作异常, 请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
4. 长时间持续工作可能导致电机表面温度升高, 请谨慎操作。
5. 严禁摔落或碰撞, 摔落或碰撞本产品有可能使其损坏, 导致工作异常。如出现摔落或碰撞导致工作异常, 请及时联系售后。

存储和保养

1. 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 禁止将本产品放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及置于热天的汽车内。
3. 请在干燥的环境中存储。
4. 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害。
5. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

关注我们获取更多信息和服务:



微信



微博



快手



抖音

说明书内容如有更新,恕不另行通知。

如对本内容有任何疑问或建议,可邮件至 service@kica-tech.com 联系我们

制造商: 桂林飞宇科技股份有限公司

网址: www.kica-tech.com | 电话: 400-990-6118/0773-2320865 | 邮箱: service@kica-tech.com